

Modell 3970


Traversen-Fangstück

In einen zweiten Raum mit dem gleichen Deckenlift ohne abzusetzen




- Optional zum Traversensystem.
- Ein Fangstück ermöglicht das Verbinden einer Fahrschiene in einem Raum mit einer anderen, angrenzenden Schiene im nebengelegenen Raum. Auf diese Weise können Transfers von einem Raum in einen anderen leichtgängig und ohne Unterbrechung stattfinden.
- Vom Traversensystem ist sowohl eine manuelle Version verfügbar für die assistierte Nutzung, als eine elektrische Version, die auch vom betroffenen Lifternutzer völlig selbstständig bedient werden kann.
- Ein integriertes Sicherheitssystem sorgt dafür, dass sich der Deckenmotor nur weiterbewegt, wenn beide Schienen verbunden sind.

Traversen-Fangstück

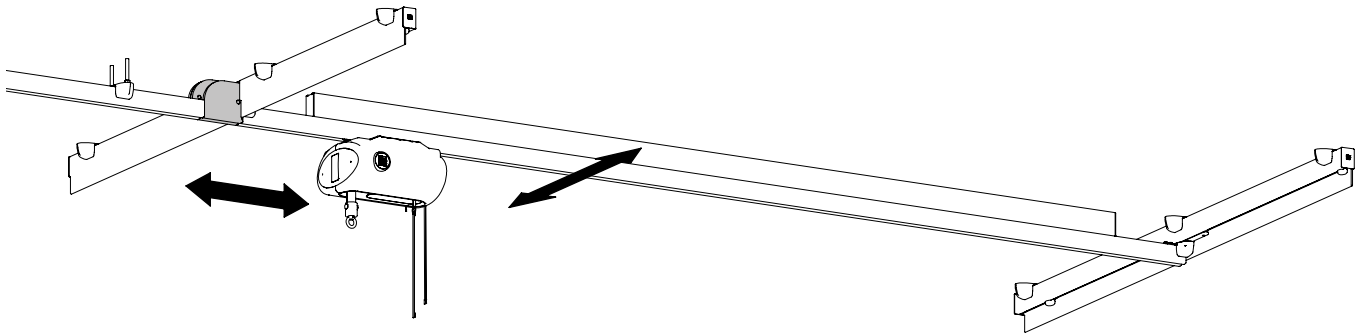


Abmessungen (mm)

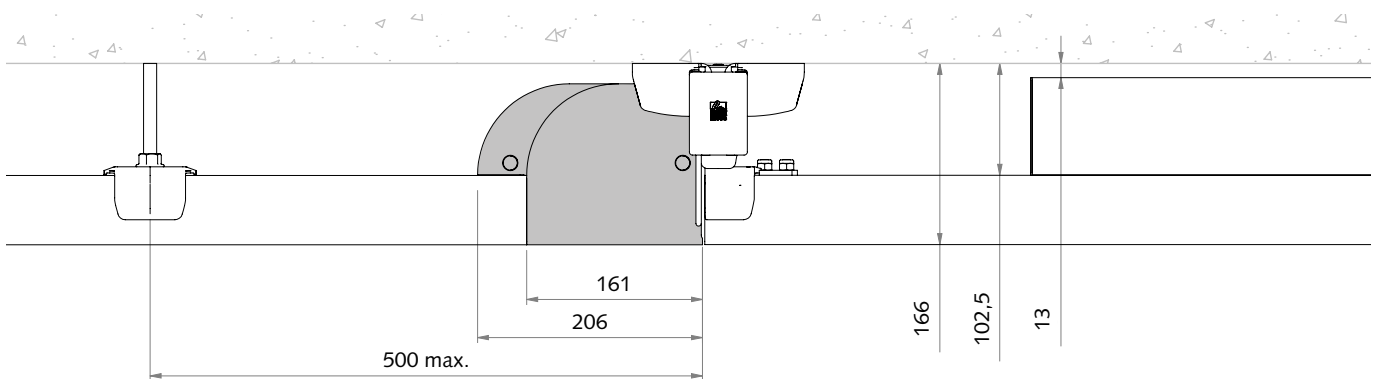

* Die Zeichnung ist ein Beispiel für eine Querschleife kleiner oder gleich 5 Meter.

Technische Daten

Maximale Hubkraft.....240 kg
 Material.....Aluminium lackiert, Stahl verzinkt, Stahl, POM, FKM

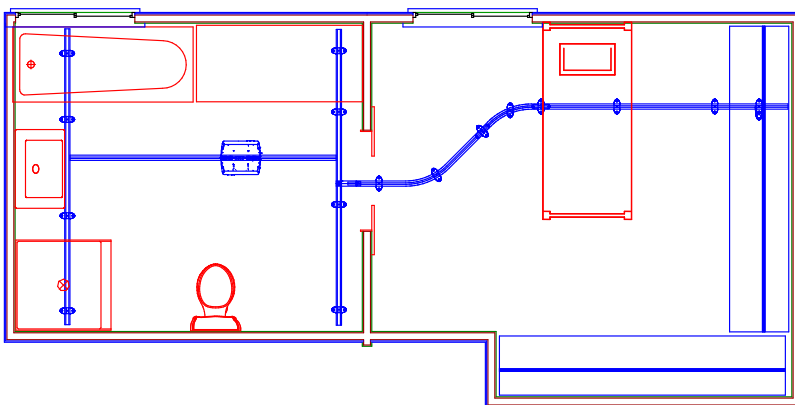

Für weiterführende Informationen
 wenden Sie sich bitte an